


## DESTORNILLADO PARA IMPLANTE CON TORQUÍMETRO

Ref0610007

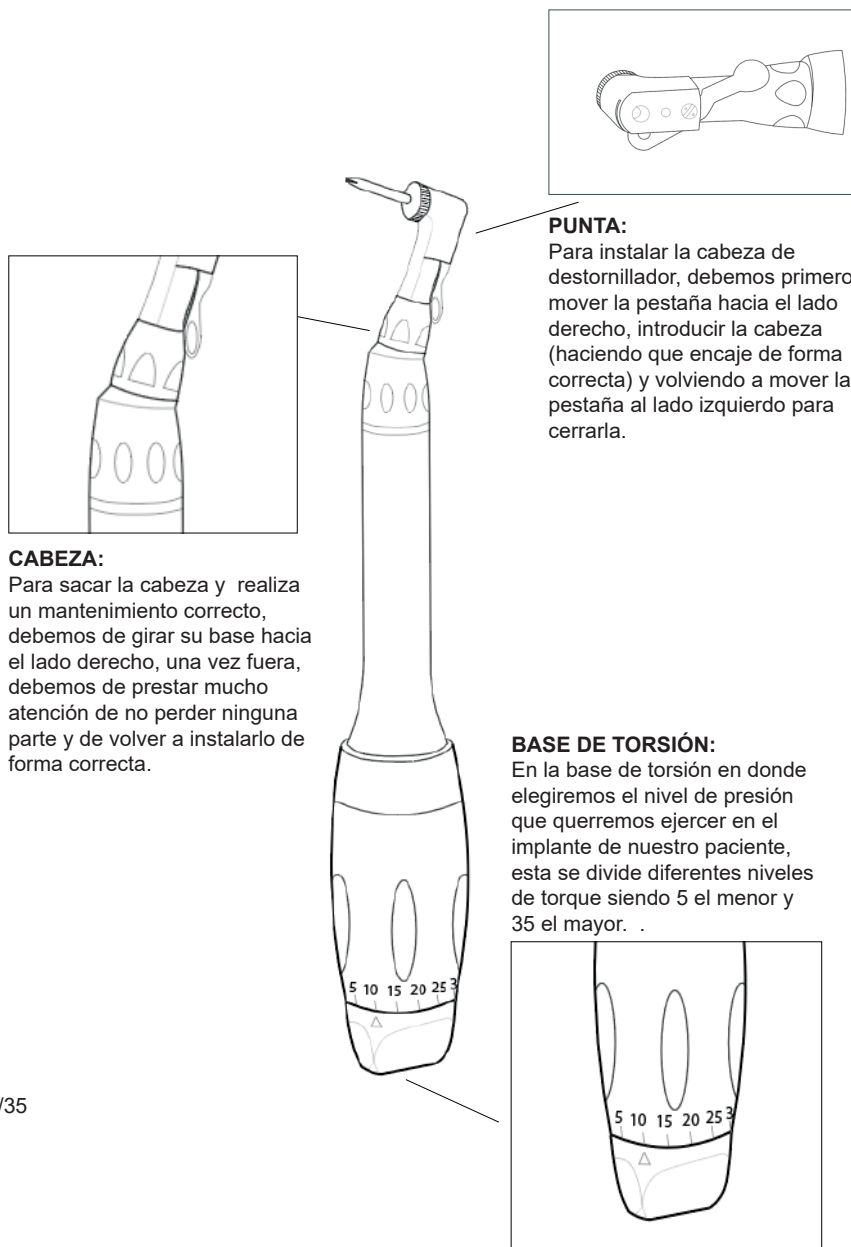

**CABEZA:**  
Para sacar la cabeza y realiza un mantenimiento correcto, debemos de girar su base hacia el lado derecho, una vez fuera, debemos de prestar mucho atención de no perder ninguna parte y de volver a instalarlo de forma correcta.

**PUNTA:**  
Para instalar la cabeza de destornillador, debemos primero mover la pestaña hacia el lado derecho, introducir la cabeza (haciendo que encaje de forma correcta) y volviendo a mover la pestaña al lado izquierdo para cerrarla.

**BASE DE TORSIÓN:**  
En la base de torsión en donde elegiremos el nivel de presión que queremos ejercer en el implante de nuestro paciente, esta se divide diferentes niveles de torque siendo 5 el menor y 35 el mayor.

### CARACTERÍSTICAS:

- Llave dinamométrica universal
- 7 Posiciones de torque: 5/10/15/20/25/30/35
- Desembrague automático
- Peso de solo 135g
- Micro-cabeza angulada de 100°
- Diseño en una sola pieza para limitar la aparición de bacterias
- Esterilizable en autoclave ( 135°)

