



LINDA

BAÑO ULTRASONIDOS



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948



LINDA

BAÑO ULTRASONIDOS

LINDA es el nuevo baño de ultrasonidos FARO que garantiza un lavado **seguro y eficaz**, obteniendo en poco tiempo una limpieza profunda incluso en las zonas más difíciles de alcanzar manualmente.

LINDA está equipado con un nuevo generador que incorpora un oscilador ultrasónico especial con **tecnología Sweep System**, que permite:

- reducir los tiempos de lavado;
- evitar el daño de piezas delicadas;
- mejorar los resultados de la limpieza.

SWEEP SYSTEM

La tecnología Sweep System genera una oscilación variable de las frecuencias de los ultrasonidos entre los 38 y los 40 kHz; las ondas ultrasónicas se distribuyen así de manera homogénea para obtener una limpieza más uniforme.


FÁCIL DE USAR

La presencia del **temporizador** (que permite programar la duración del tratamiento hasta 15 minutos) y de la **calefacción con termostato a 60°C**, hace que el uso de **LINDA** sea fácil e intuitivo.

ACCESORIOS Y DISPONIBILIDAD

Disponible en versiones de **3 y 6 litros**, ambas de acero inoxidable con desagüe y llave de serie, **LINDA** cuenta de serie con:

- tapa de acero inoxidable;
- cesta rectangular portainstrumentos de malla hecha de alambre de acero inoxidable electropulido;
- soporte posavasos de alambre de acero inoxidable electropulido;
- 2 vasos de vidrio con anillo de soporte.
- 2 bicchieri in vetro con anello di sostegno.

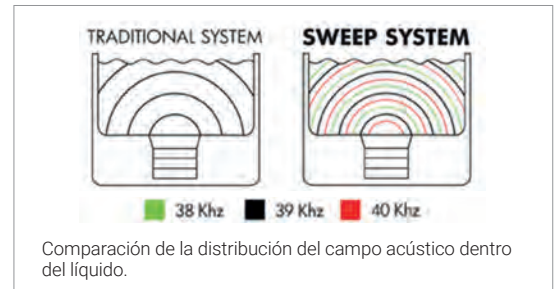

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES*	LINDA 3	LINDA 6
MODELO	SONICA 2200MHD S3	SONICA 3200MH S3
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
POTENCIA MEDIA CONSUMIDA/ CON CALEFACCIÓN	130 W/305W	180 W/355W
DIMENSIONES EXTERIORES	270 x 170 x 260 mm (LxPxH)	325 x 270 x 260 mm (LxPxH)
DIMENSIONES INTERIORES DEL TANQUE	270 x 140 x 100 mm (LxPxH)	300 x 240 x 100 mm (LxPxH)
PESO	3,5 kg	4,3 kg
CAPACIDAD DEL TANQUE 3 L 6 L	3 l	6 l
FRECUENCIA DE ULTRASONIDOS	40 kHz +/- 5%	40 kHz +/- 5%

Dispositivo Médico de clase 1, Clase de aislamiento 1.

*Los datos técnicos indicados representan valores típicos sujetos a tolerancia.



Dispositivo Médico
conforme a la
directiva 93/42/CEE



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

FARO S.p.A.

Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE

Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

INFO LINE:

