BADER.

DATA SHEET / INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES Ref. 09070104

ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA PORTÁTIL HEMOSUCTOR CON ESCUPIDERA

DESCRIPCIÓN GENERAL



Equipo de aspiración dental diseñado para utilizarse junto a unidades de tratamiento odontológico, facilitando la eliminación de saliva, líquidos y restos de alimentos de la cavidad oral del paciente.

Incorpora un sistema de aspiración tipo vórtice, un mecanismo de separación de líquidos y aire y un filtro para la retención de partículas sólidas.

Además, dispone de escupidera integrada, suministro de agua y jeringa de triple, reuniendo diferentes funciones en una única unidad auxiliar.

COMPONENTES

- Bomba de vacío con protección frente a sobrecargas y alivio de presión.
- Cánulas de aspiración fuerte y débil.
- Filtro incorporado.
- Escupidera con giro de 90°.
- Jeringa de triple .
- Botellas de suministro de agua para la jeringa y la escupidera.
- Botellas de recogida de aspiración y escupidera.
- Ruedas giratorias para el desplazamiento.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Aspiración fuerte y débil con separación de líquidos y filtrado de partículas.
- Llenado del vaso y enjuague de la escupidera mediante sus controles.
- Drenaje temporizado de 60 segundos mediante el botón de drenaje.
- Suministro de agua para la jeringa de tres vías.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo / referencia	**09070104**
Tensión	**220 V ±10 %**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Potencia	**0,60 / 0,62 kW**
Corriente	**3,7 / 4,5 A**
Capacidad del depósito de recogida	**3 L**
Capacidad de agua	**1 L**
Vacío máximo	**−12 kPa**
Nivel de ruido	**64 dB**
Peso neto / bruto	**49 kg / 57 kg**
Dimensiones del producto	**65 × 33 × 96 cm**
Protección del motor	**IP55 · aislamiento clase F**
Conexión externa de aire	**Ø 6 × 4 mm**
Conexión externa de agua	**Ø 8 × 5 mm**

INSTALACIÓN

- Uso exclusivamente en interiores, sobre una superficie plana, sólida y estable, en un entorno limpio y bien ventilado.
- Toma de corriente exclusiva para el equipo, con conexión a tierra fiable. Mantener el equipo alejado del calor, de inflamables y de gases nocivos o corrosivos.
- El manual recomienda un conducto de ventilación de Ø 25 mm para evacuar los gases de escape.
- El manual requiere una tubería de desagüe subterránea de 25 mm de diámetro interior y conectar la tubería de drenaje al desagüe.

INDICACIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO


- Apagar y desconectar el equipo antes de limpiar o realizar mantenimiento. Utilizar mascarilla y guantes impermeables.
- Limpiar el exterior con un paño suave humedecido con agua tibia y escurrido. No rociar agua directamente ni usar alcohol, benceno o disolventes.
- Revisar el filtro y limpiarlo, cuando proceda, dos veces por semana. Enjuagar con agua limpia y volver a instalarlo correctamente.
- No utilizar detergentes espumosos ni productos corrosivos en las tuberías. Seguir el procedimiento y las diluciones indicados en el manual

ALMACENAMIENTO

- Temperatura medio ambiente: +5ºC - +40ºC
- Humedad relativa: 30% - 75%
- Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- Temperatura de agua más alta +25ºC

CERTIFICACIONES

INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

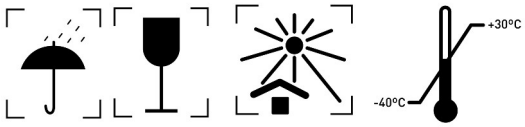

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es
Atención al cliente: +34 986 190 307