




i-Sensor

Más claro y más duradero



 Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
 Information Industrial Park, National High-tech
 Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
 Registrant/manufacturer/after-sales service provider:
 Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
 Tel:
 Sales Dept.: 0773-5873196/2350599
 Fax: 0773-5822450
 After-sales Service Dept.: 0773-5827898/13978361362
 E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com
 Website: <http://www.glwoodpecker.com>
 ZMN/WI-10-161


DISTRIBUTED BY:



Software fácil de usar

Software inteligente y potente

i-Sensor ofrece un software sencillo y fácil de manejar, con instalación de un solo clic y uso inteligentes, y está equipado con potentes funciones de procesamiento de imágenes, para que pueda mejorar de forma significativa y rápida la calidad de las radiografías.

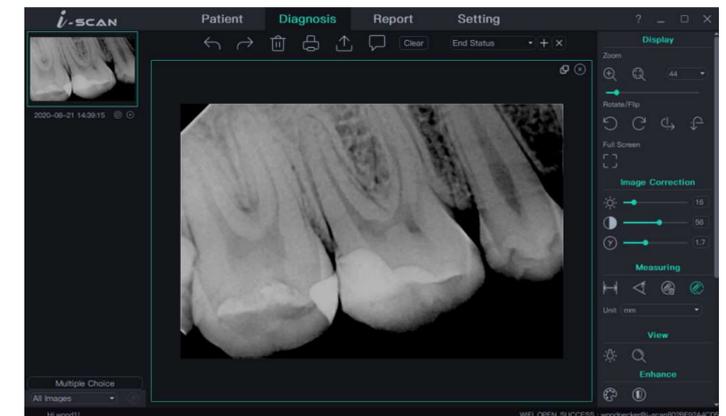

Instalación inteligente de un solo clic



Aplicaciones de procesamiento de imágenes definidas por usuarios



Uso y actualización gratuitos

Imagen de alta resolución


Resolución teórica de 25 lp/mm

Con el chip ADC de 16 bits líder, que aporta hasta 60000+ de escala de grises. Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles, permite más detalles, mejor calidad de imagen con una resolución teórica de 25 lp/mm. Efecto de imagen más claro, para poder encontrar fácilmente la sutil bifurcación del ápice radicular.



Sensor más fino de 4,4 mm

Con bordes curvos ergonómicamente optimizado y un grosor de 4,4 mm, el i-Sensor hace que la colocación sea más fácil que nunca.

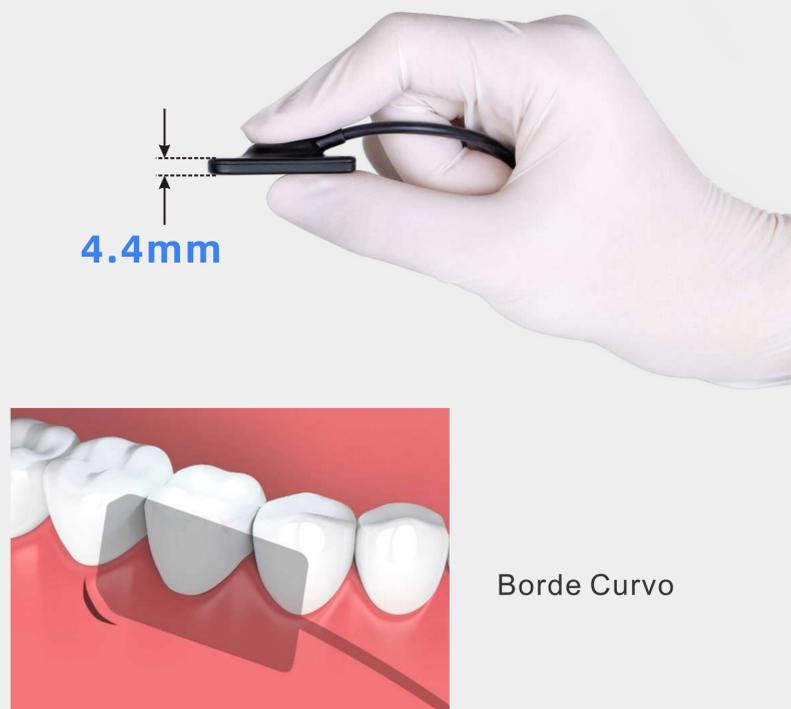

4.4mm



Borde Curvo

Durable y fiable

Prueba de flexión de 80000+

i-Sensor está diseñado para evitar cualquier tipo de daño en su uso diario. Tras el uso real y decenas de miles de experimentos de flexión, el producto es duradero.

Aporta una experiencia ultraligera la robusta carcasa CNC mezclada con tecnología de soldadura por ultrasonidos y la protección IP68 puede sumergirse en líquido desinfectante para evitar infecciones cruzadas.



IP68