



# V V Light

1 Seg. Curado

Intensidad de luz hasta 2500 mW/cm<sup>2</sup>

Cabezal metálico giratorio de 360°

Salida de luz focalizada

Ligero y fácil de sujetar



INCORPORADO Y CURADO DE 1 SEG.



## FUENTE DE LUZ FOCALIZADA PARA CURADO PROFUNDO


Ángulo del haz de 15,8° para una luz más focalizada y una mayor penetrabilidad, lo que proporciona un curado de alta eficacia

## CONTROL INTELIGENTE DE 4 MODOS DE TRABAJO


Respuesta rápida para una flexibilidad de tratamiento suprema

### MODO NORMAL

1000-1200mW/cm<sup>2</sup>  
Adecuado para diversos procedimientos dentales, como empastes, restauraciones, etc.  
Ajuste de tiempo: 5s, 10s, 15s, 20s

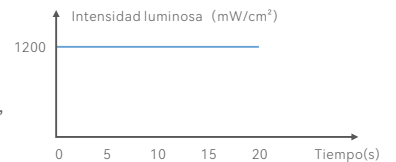


### Modo Alto

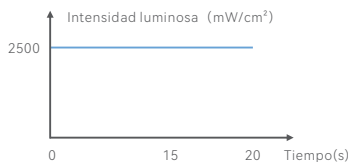


2300-2500mW/cm<sup>2</sup>  
Permite el curado de resina de 2mm en 1seg., adecuado para brackets de ortodoncia, carillas de porcelana y adhesión para estaca.

### Modo Progresivo

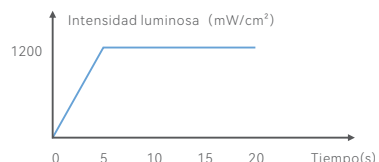

1000-1200mW/cm<sup>2</sup>  
Aumento gradual de la intensidad luminosa de 0 a 1200mW/cm<sup>2</sup> para minimizar la contracción de la resina y las microfugas, garantizando un relleno denso  
Ajuste de tiempo: 5s, 10s, 15s, 20s

### Modo Impulso

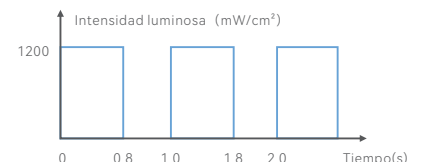

1000-1200mW/cm<sup>2</sup>  
El LED se detendrá durante 0,2s en un intervalo de 0,8s de curado, reduciendo eficientemente la generación de calor durante el tratamiento circulatorio  
Ajuste de tiempo: 5s, 10s, 15s, 20s

## ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIÓN

Longitud de onda	385nm ~ 515nm
Fibra óptica	360° rotatable metal light head
Potencia	10W
Fuente de alimentación	24V~ 50Hz/60Hz
Peso de la pieza de mano	74g

Dimensiones (LxA×H)	22mm×22.8mm×244mm
Modos de trabajo	Modo Normal 1000-1200mW/cm <sup>2</sup> Modo Progresivo 1000-1200mW/cm <sup>2</sup> Modo Impulso 1000-1200mW/cm <sup>2</sup> Modo Alto 2300-2500mW/cm <sup>2</sup>
Garantía	2 años
Configuración	Unidad principal, Cubierta de luz, Fibra óptica



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.  
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech  
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China

**RUMAR**  
mayorista dental

**Impotador mayorista Woodpecker / DTE para España y Portugal**

**RUMAR Cedeira S.L.**

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid

Tlfno.: 91 849 01 04

Tlfno. móvil / WhatsApp: +34 626 327 863

