



Kits / Estuches rotatorio 2026/2027

ESTUDIANTES

TODOS nuestros estuches
disponen de:



TÜV Rheinland®
LGAM
Precisely Right.



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

Elige tu kit completo desde

398,00€



¡Garantía durante
toda la carrera!



RUMAR
mayorista dental

Revisión gratuita
al finalizar cada curso

P. ¿Por qué elegir los estuches R-Tech®?

R. Colaboración con depósitos y servicios técnicos de toda España, para que se adapten a las exigencias de **prestaciones** y **configuración de cada universidad**, logrando ofrecer lo que necesitas al **precio más competitivo**. ¿Qué te comprarías para aprender a conducir? ¿un KIA o un Mercedes?

P. No conozco la marca R-Tech®

R. Normal. No es una marca mundialmente conocida, pero vamos, que el robot de cocina de LIDL es la leche... R-Tech® es una marca de **RUMAR Mayorista Dental**.

P. ...¿y qué es RUMAR Mayorista Dental?

R. RUMAR es una **empresa española** ubicada en **Madrid**, que desde **2004** suministra repuestos y aparatología a más de **450 distribuidores** y **servicios técnicos** en toda España y Portugal. Su **equipo**, de más de **20 personas**, está **detrás** de muchas **grandes empresas** que sí conoces 😊. Son los mayoristas para España y Portugal de marcas como: Woodpecker®, DTE®, Faro®, Pro-Tip TURBO®, TKD®, Metasys®...

P. ¿Qué garantía tengo?

R. Pues mira, es muy fácil, las grandes marcas pueden conformarse con su nombre, R-Tech® no se conforma. Por eso ofrece el **MEJOR SERVICIO**:

- Tu estuche tiene **GARANTÍA hasta finalizar la carrera**.
- Si quieres, antes de irte de vacaciones en verano y al final de la carrera te hacen una **revisión GRATIS**.
- Si tienes un problema en 24-48 horas lo resuelven.
- Si pierdes un elemento del estuche lo tendrás ¡Siempre en Stock. Entrega en 24 horas. ¡¡¡OJO!!!

a un precio proporcional al precio del estuche.

Y si al finalizar la carrera decides comprar algún otro producto de mayor valor de los que comercializan, te harán un descuento por el valor de tu estuche 😊.



Que NO te engañen

¡INSISTIMOS!

TODOS nuestros estuches disponen de:



TÜV Rheinland®
LGAI
Precisely Right.



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

Certificado Europeo (CE), declaración de conformidad europea y registro sanitario español. Por lo que, por supuesto están homologados para su utilización con pacientes en clínica.

Desde 2017 hemos suministrado **más de 2.000 estuches a estudiantes de odontología** en universidades de toda España. A día de hoy, al menos **1.100 estudiantes** están utilizando **estuches R-Tech en sus prácticas**.



Solar

Kit / Estuche rotatorio



Turbina PRO T1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 320.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 25.000rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref.: 58-284

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Acople sin luz

- Sin luz
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4

Ref.: 58-342

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, 2 llaves para acoples y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-224EE

648,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Vita

Kit / Estuche rotatorio



Turbina PRO TIL

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 320.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 25.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref.: 58-284

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, llave para acople y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-222EE

598,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Ignite

Kit / Estuche rotatorio



Turbina PRO T 1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 320.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, llave para acople y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-218EE

498,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Vulcano

Kit / Estuche rotatorio



Turbina ECO T2

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Velocidad ≥ 340.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Spray simple
- 21 W

Ref.: 58-250

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 25.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable

Ref.: 58-284

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-220EE

398,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



Sky

Kit / Estuche rotatorio

CE 0197



Turbina ECO T2

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Velocidad ≥ 340.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Spray simple
- 21 W

Ref.: 58-250

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-219EE

298,00€

IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita
al finalizar cada curso



Atlas

Kit / Estuche rotatorio



Turbina HP-33KL

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 450.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 20 W

Ref.: 28-HP33KL

Contra ángulo WJ-11L

- 1:1
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 41.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- 2 orificios de spray

Ref.: 28-WJ11L

Contra ángulo WJ-45TL

- 1:5
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 212.500 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- 4 orificios de spray

Ref.: 28-WJ45TL

Acople LED tipo KaVo®

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Con regulación de spray

Ref.: 28-ZMNKLED

Incluye: Maletín de transporte, botella de lubricante PREMIUM 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



¡Garantía durante toda la carrera!

Ref.: 58-238EE

688,00€

IVA NO INCLUIDO

Revisión gratuita
al finalizar cada curso



Quantum

Kit / Estuche rotatorio



Contra ángulo WJ-11L

- 1:1
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 41.000 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- 2 orificios de spray

Ref.: 28-WJ11L

Contra ángulo WJ-45TL

- 1:5
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 212.500 rpm
- Conex. INTRAMatic-ISO
- 4 orificios de spray

Ref.: 28-WJ45TL

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



Ref.: 58-236EE

468,00€


IVA NO INCLUIDO

¡Garantía durante toda la carrera!

Revisión gratuita al finalizar cada curso



¿Cómo realizar un **MANTENIMIENTO** óptimo de tu Kit de instrumental rotatorio?

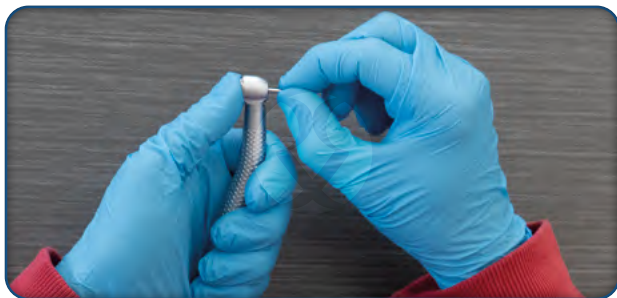


1.

Desconecta el instrumento del acoplamiento o del contra ángulo del micromotor y **retira la fresa.**

2.

Desinfecta la superficie del instrumento.

Después, con ayuda de un cepillo interproximal **limpia el interior de la pinza.** Por último, utiliza la aguja de mantenimiento en los orificios de spray.

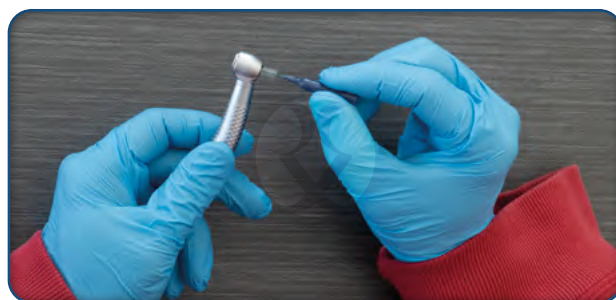

3.

Coloca la boquilla de engrase en el orificio de entrada de la fresa y **lubrica con un solo toque.**

4.

Introduce la boquilla de engrase según la conexión que necesites en la parte posterior de tu rotatorio y **lubrica hasta que el aceite salga transparente.**



5.

¡Listo! ya puedes **meter tu instrumental en el autoclave.**

¡RECUERDA!

Realizar un mantenimiento de forma regular alargará la vida útil de tu rotatorio