

CE



TERMOSELLADORA  
AUTOMÁTICA  
**FS1010**

NOVEDAD

### Rápida, compacta y fiable

Realizada con materiales de alta calidad, **FS1010** es la nueva termoselladora automática ideada para asegurar una perfecta y uniforme soldadura en tiempos rápidos, optimizando el espacio ocupado en el área de trabajo.

#### SOLDADURA ÓPTIMA

Gracias al **ajuste** y al **control electrónico de la temperatura**, se obtiene una constante monitorización del calentamiento en la zona de sellado, garantizando así una soldadura óptima y eliminando el riesgo de daño del sobre.



# TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA FS1010

NOVEDAD

## EFICIENCIA Y RAPIDEZ


La **alta calidad de las innovadoras resistencias térmicas** permite difundir uniformemente el calor en el sobre, evitando interrupciones debidas a un calentamiento excesivo. Además, el **uso inmediato** después de solo 60 segundos del encendido y la **velocidad de soldadura** hacen de FS1010 una termoselladora rápida y eficiente al mismo tiempo.

## DISEÑO FUNCIONAL

**Materiales de elevada calidad** junto con una **forma ergonómica y esencial**, hacen de FS1010 una selladora de diseño agradable, permitiéndole mantener un elevado nivel de higiene. Además, **las dimensiones y el peso contenido** permiten una drástica reducción del espacio ocupado en las áreas del estudio, manteniendo un rendimiento equivalente a productos de volúmenes mayores.

## TECNOLOGÍA USER FRIENDLY

Equipada con **visualizador LED digital** y con control electrónico de la temperatura (°C y °F) por medio de solo dos mandos, FS1010 es la termoselladora de uso fácil e intuitivo. Las señales acústicas y luminosas dan continuas informaciones sobre las condiciones de operatividad de la máquina.

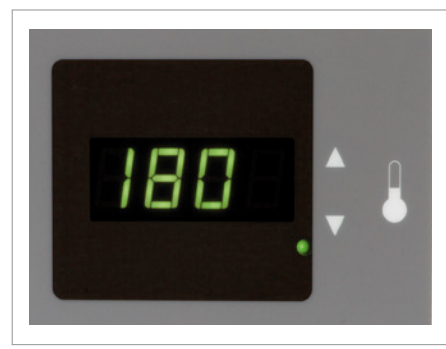

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES GENERALES	
Tensión de alimentación	115/230 Vac
Frecuencia de red	50/60 Hz
Potencia nominal	750 W
Dimensiones externas	380 x 100 x 240 mm (LxHxP)
Peso	7 kg
Tipo de soldadura	A ciclo continuo y temperatura constante
Gama de temperatura	0 - 200°C
Anchura de la banda de sellado	12 mm
Material sellable (conforme con los estándares EN 868)	Laminados de papel/polipropileno
Velocidad de sellado	10 m/min

Normas aplicadas: 2014/35/CE - 2014/30/CE - Estándar de referencia: EN 61010-1, EN 61326-1. Garantía: 24 meses.



DESDE 1948: EXPERIENCIA Y RENOVACIÓN

### FARO S.p.A.

via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540  
[www.faro.it](http://www.faro.it) - [export@faro.it](mailto:export@faro.it)

### FARO FRANCE

Za Tgv Coriolis - 71210 Monchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688  
[www.farofrance.com](http://www.farofrance.com) - [farofrance@farofrance.com](mailto:farofrance@farofrance.com)

### FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933  
[www.farodeutschland.de](http://www.farodeutschland.de) - [info@farodeutschland.de](mailto:info@farodeutschland.de)

Empresa Certificada



ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

INFO LINE:

